

HISTOCORE WATER BATH M

HISTOCORE SLIDE DRYER

FAÇAS AS SUAS LÂMINAS FLUTUAR E SECAR MAIS FACILMENTE



HistoCore Water Bath M:

- Trocas de água fáceis com o nosso Bandeja de água destacável, anodizado para maior durabilidade
- Bandeja de água preto com retroiluminação LED incorporada proporciona um bom contraste e visibilidade para avaliar a identificação de fitas e a qualidade do corte
- Os controles do painel tátil OLED proporcionam uma interface intuitiva e fácil de utilizar para banho-maria e secador de lâminas
- Cada banho-maria pode fornecer energia para até 2 secadores de lâminas



HistoCore Slide Dryer como acessório*:

- O desenho economizador de espaço garante uma área útil de cobertura reduzida
- Capacidade até 30 lâminas para eficiência melhorada
- O fundo da prateleira de secagem preta proporciona uma boa visibilidade da fita
- Suporte aquecido angular de 45°, para fácil colocação e recolha de lâminas
- Seca as lâminas à temperatura ambiente até 75 °C
- Liga-se diretamente ao HistoCore Water Bath M, eliminando a necessidade de uma fonte de alimentação separada

* O "HistoCore Slide Dryer" é projetado e produzido como um acessório, não funcionando sem estar ligado ao "HistoCore Water Bath M"

Para uso em diagnóstico in vitro

Advancing Cancer Diagnostics
Improving Lives

Leica
BIO SYSTEMS




Copyright © 2023 Leica Biosystems, uma divisão da Leica Microsystems Inc. Todos os direitos reservados. LEICA e o logotipo Leica são marcas comerciais registradas da Leica Microsystems IR GmbH. HistoCore é uma marca comercial do grupo de empresas da Leica Grupo Biosystems nos EUA e opcionalmente em outros países. Outros logotipos, nomes de produtos e/ou empresas podem ser marcas comerciais dos respectivos proprietários.

230253 PT Rev C • 11/2023

HISTOCORE WATER BATH M

HISTOCORE SLIDE DRYER

AS OPÇÕES DE ESQUEMA FLEXÍVEIS ADAPTAM-SE ÀS SUAS NECESSIDADES DE FLUXO DE TRABALHO

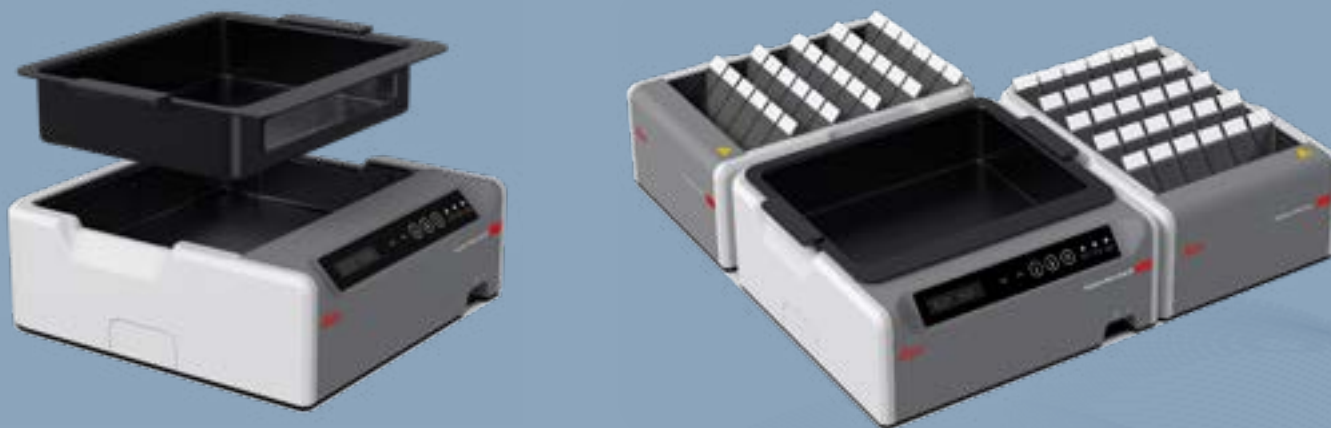

Especificação técnica

Name de modelo	HistoCore Water Bath M	HistoCore Slide Dryer
Número do pedido	140607020C1 Instrument principal	140607010C0 Accessoire optionnel
Temperatura de aquecimento	Até 60 °C	Até 75 °C
Dimensão (LxPxA)	280 x 280 x 105 mm 11.023 x 11.023 x 4.134 in	200 x 280 x 98 mm 7.874 x 11.024 x 3.858 in
Dimensões da Bandeja de água (LxPxAxA)	230 x 180 x 53 mm 9.055 x 7.087 x 2.087 in	
Peso vazio	3 kg (sem embalagem)	3 kg (sem embalagem)
Tensão de alimentação nominal	100-120 VAC ±10% 220-240 VAC ±10%	100-120 VAC ±10% 220-240 VAC ±10%
Iluminação LED interna	Sim	
Velocidade de aquecimento	20 min. +/- 10%, com preenchimento de volume padrão de água, de 15 °C a 45°C, em temperatura ambiente de 18°C.	

* O "HistoCore Slide Dryer" é projetado e produzido como um acessório, não funcionando sem estar ligado ao "HistoCore Water Bath M"

Para uso em diagnóstico in vitro

Advancing Cancer Diagnostics
Improving Lives

Leica
BIO SYSTEMS

